

Stodent gipsy dentystyczne



DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ ŚRODOWISKA

Technical
Dental Stones

Zhermack[®]
TECHNICAL



STODENT II

Naturalny gips alabastrowy typ 2

Zastosowanie

Prace pomocnicze, np. puszkowanie modeli oraz mocowanie modeli w artykulatorze.

Zalety

Niski stopień rozszerzalności, bardzo dobra płynność, łatwość mieszania z wodą, niska cena, łatwość uwalniania gotowej protezy z puszki.



STODENT III

Twardy gips modelowy typ 3

Zastosowanie

Modele robocze przy wykonywaniu protez ruchomych osiadających częściowych, całkowitych oraz protez szkieletowych.

Zalety

Dobre odwzorowanie detali, gładka powierzchnia, łatwość obróbki, wysoka odporność na złamanie w czasie uwalniania z wycisku.



STODENT III Arti

Twardy gips modelowy typ 3

Zastosowanie

Mocowanie modeli w artykulatorze.

Zalety

Krótki czas wiązania, łatwość obróbki, wysoka odporność mechaniczna.



STODENT III Ortho


Twardy gips modelowy typ 3

Zastosowanie

Modele robocze przy wykonywaniu ruchomych aparatów ortodontycznych.

Zalety

Dobre odwzorowanie detali, gładka powierzchnia, łatwość obróbki, podwyższona powierzchniowa odporność na ścieranie, idealna biel, doskonała płynność.

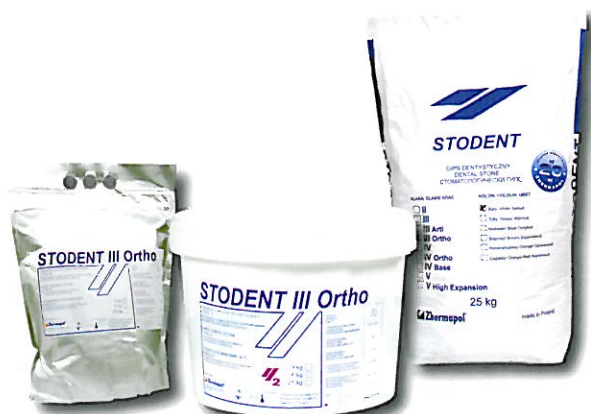

STODENT IV

Super twardy gips dentystyczny typ 4

Zastosowanie

Modele robocze przy wykonywaniu protez stałych, prac kombinowanych, protezowań poimplantacyjnych.

Zalety

Bardzo dobre odwzorowanie detali, gładka powierzchnia, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, bardzo dobra stabilność wymiarów.



STODENT IV Base

Super twardy gips dentystyczny typ 4

Zastosowanie

Podstawy modeli dzielonych.

Zalety

Bardzo dobra płynność, gładka powierzchnia, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, bardzo dobra stabilność wymiarów.



STODENT V

Super twardy gips o podwyższonej ekspansji typ 5

Zastosowanie

Modele robocze przy wykonywaniu protez stałych, modele dzielone.

Zalety

Bardzo dobre odwzorowanie detali, gładka powierzchnia, bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, duża rozszerzalność liniowa.



STODENT V High Expansion

Super twardy gips o wysokiej ekspansji typ 5

Zastosowanie

Modele robocze przy wykonywaniu protez całkowitych, w których pożądane jest zniwelowanie skurczu innych materiałów takich jak acetal lub metal.

Zalety

Bardzo dobre odwzorowanie detali, gładka powierzchnia, bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, bardzo duża rozszerzalność liniowa.



Stodent gipsy dentystyczne

Dane techniczne

Nazwa gipsu	Proporcje mieszania	Czas mieszania	Czas wiązania	Odporność na ściskanie	Rozszerzalność liniowa	Kolor	Opakowanie / Indeks			
	ml/g	sek.	min.	Mpa (po 2 godz.)	% (po 1 godz.)		3 kg torebka	5 kg wiaderko	6 kg wiaderko	25 kg worek
Stodent II	50/100	90	14-18	10±2	max. 0,25	biały	-	G2B05	-	G2B25
Stodent III	30/100	90	10-14	25±2	max. 0,15	żółty niebieski	G3Z03 G3N03	- -	G3Z06 G3N06	G3Z25 G3N25
Stodent III Ortho	28/100	90	10-14	25±2	max. 0,15	biały	G3B03	-	G3B06	G3B25
Stodent III Arti	30/100	90	4-6	25±2	max. 0,15	żółty	G3A03	-	G3A06	G3A25
Stodent IV	18-20/100	90	8-12	45±2	max. 0,09	brązowy	G4B03	-	G4Z06	G4Z25
Stodent IV Base	24/100	90	8-12	35	max. 0,10	ceglasty	G4C03	-	G4C06	G4C25
Stodent V	18/100	90	8-12	50±2	min. 0,15	pomarańczowy	G5P03	-	G5P06	G5P25
Stodent V High Exp.	18/100	90	6-8	50±2	min. 0,65	żółty	G5Z03	-	G5Z06	G5Z25

Akcesoria

C300992	Miska
C300991	Szpatułka
786-1018	Nożyk
786-1082	Cęgi
TP001	Dissol - 1kg preparat do rozpuszczania gipsu
TP002	Izo-sol 1l - płyn izolujący
TP003	Izo-sol 250ml - płyn izolujący

Urządzenia

C305120	Elite Mix mieszadło próżniowe
C303230	Alghamix II mieszadło
C305905	SQM 25 N obcinarka do modeli (pracująca na mokro)
C305907	SQM 25 SN obcinarka do modeli (pracująca na sucho)
C306200	A 11 wibrator (16,5 cm x 15 cm)
C306201	A 12 wibrator (24 cm x 17 cm)



Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14, 02-981 Warszawa

tel. +48 22 858 82 72

fax +48 22 642 07 14

biuro@zhermapol.pl

www.zhermapol.pl